

AI Based Segmentation

Sonia Pujol, Ph.D.

30/06/2025

AI - based Segmentation in 3D Slicer

Fichier Éditer Vue Aide

DATA DICOM SAVE Modules : Bienvenue dans Slicer



3D Slicer

Bienvenue

DATA Charger des Données

DICOM Charger des données DICOM

MODULES Installer des extensions

EXPLORER Télécharger des exemples de données

PERSONNALISER Personnaliser Slicer

DATA Explorer les données ajoutées

Commentaires



Partagez vos histoires avec nous sur le [forum Slicer](#) et faites-nous savoir comment 3D Slicer a activé vos recherches.

Nous sommes toujours intéressés à améliorer 3D Slicer, pour nous faire part de votre problème ou soumettre un rapport de bug, ouvrez [Aide > Signaler un bug](#).

› A propos


› Documentation et Tutoriels


› Mises à jour


› Remerciements

› Sonde de données

Click on Add Data in the Welcome to Slicer module

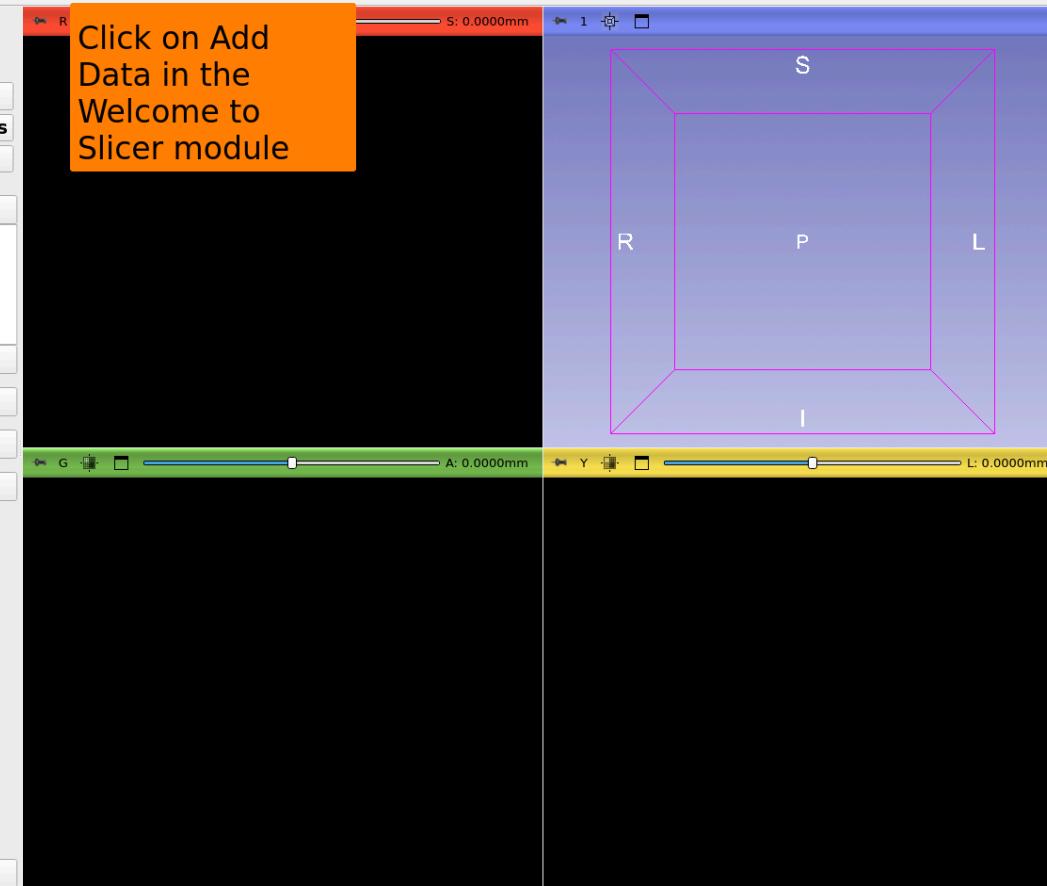

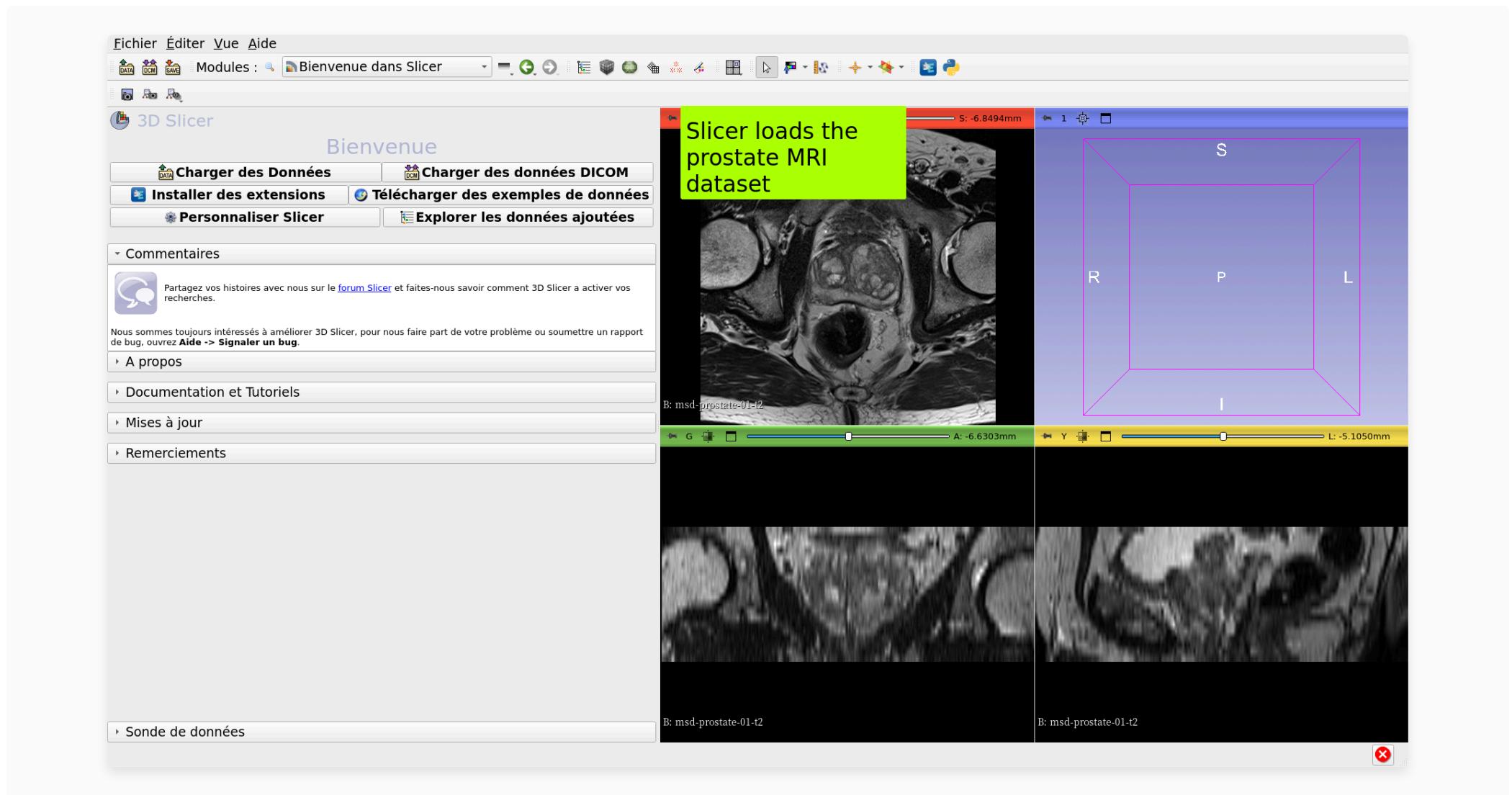

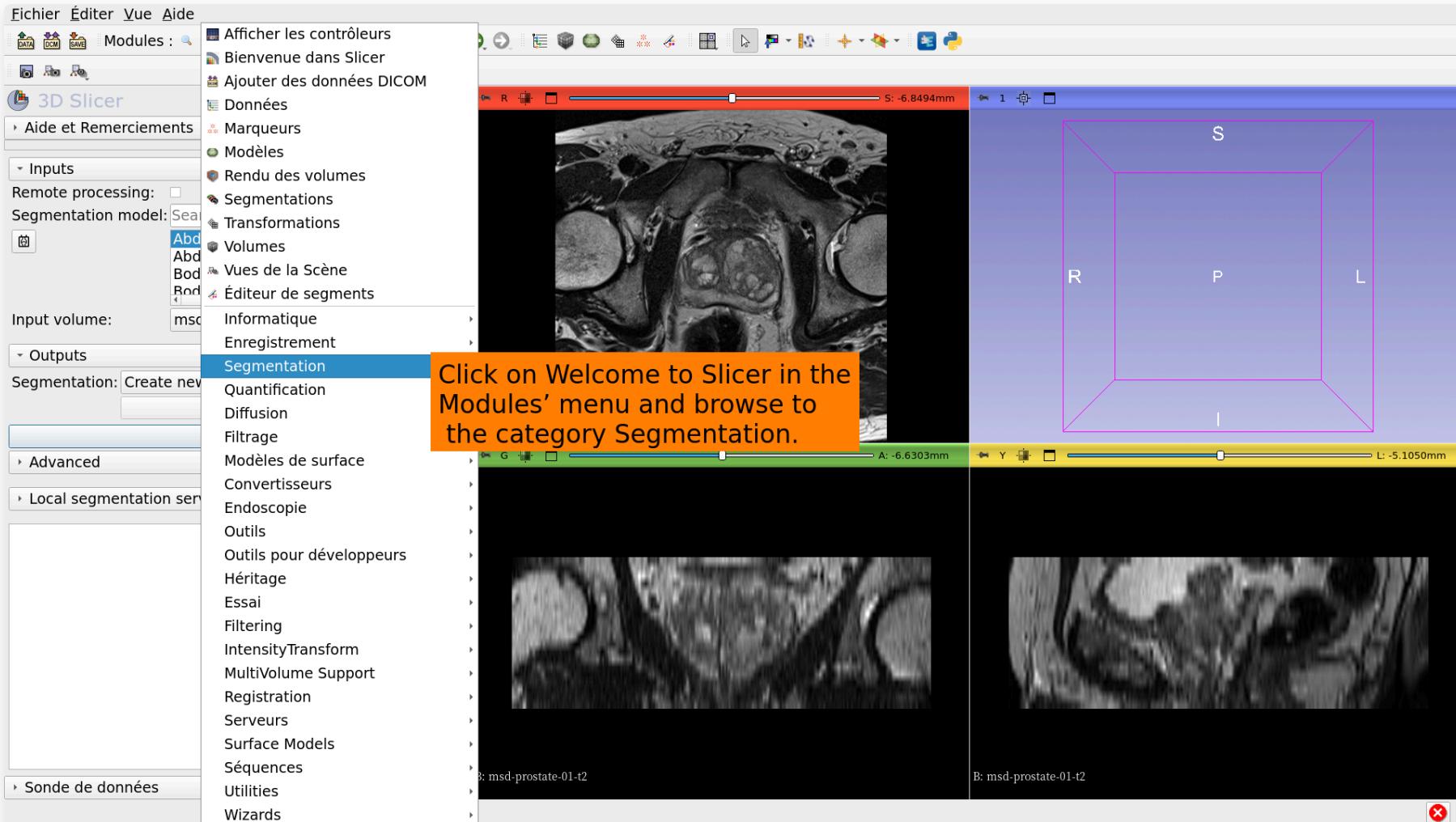

Fichier Éditer Vue Aide

DATA DICOM SAVE Modules : MONAI Auto3DSeg



3D Slicer

Aide et Remerciements

- Inputs

Remote processing:

Segmentation model: Prostate Multisequence Full text



Prostate - Multisequence

Input T2 volume:

msd-prostate-01-adc

Input ADC volume:

Select a Volume

- Outputs


Segmentation: Create new segmentation on Apply

Affichage 3D

Apply


Advanced

Local segmentation server

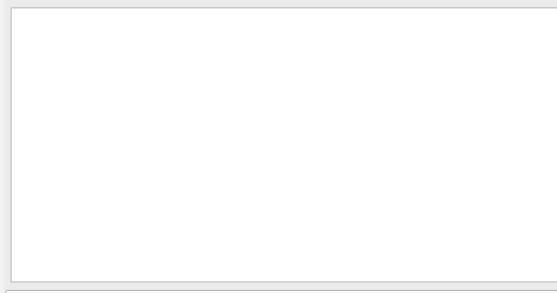

Sonde de données

Enter the model's name Prostate in the Segmentation model menu

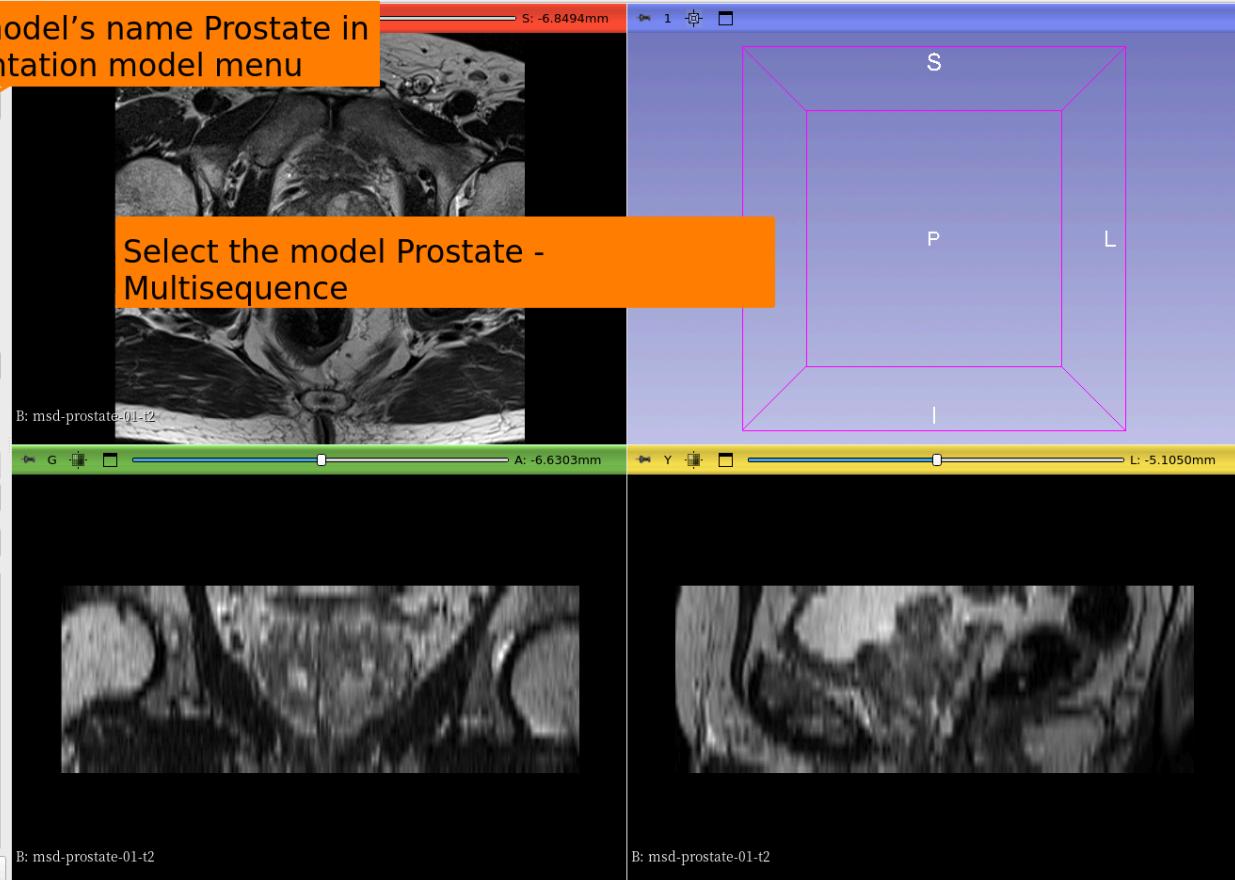

Fichier Éditer Vue Aide

DATA DICOM SAVE Modules : MONAI Auto3DSeg



3D Slicer

Aide et Remerciements

- Inputs

Remote processing:

Segmentation model: Prostate Multiseque

Prostate - Multiseq

Input T2 volume:

msd-prostate-01-adc

Input ADC volume:

Select a Volume

- Outputs

Segmentation: Create new segmentation on Apply

Affichage 3D



Apply

Advanced

Local segmentation server

Sonde de données

Enter the Input T2 volume msdprostate-01-adc

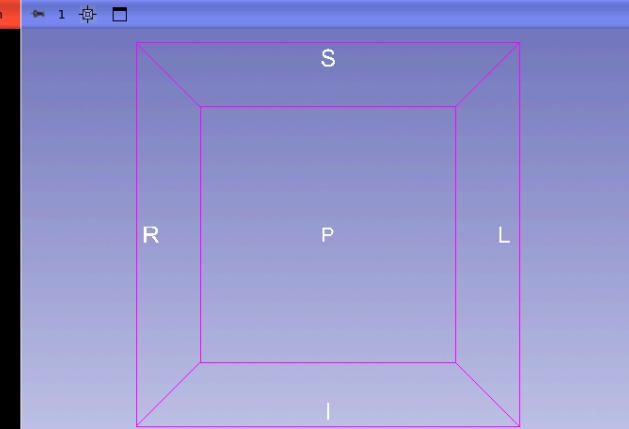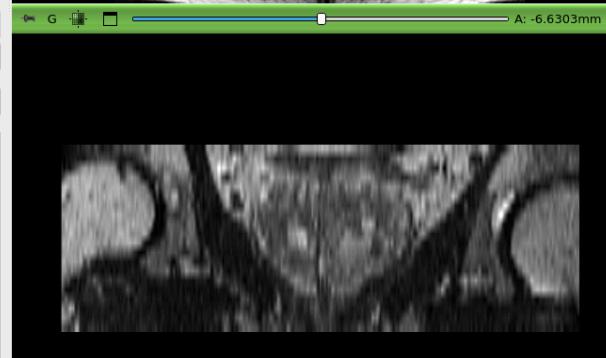

Fichier Éditer Vue Aide

DATA DICOM SAVE Modules : MONAI Auto3DSeg



3D Slicer

Aide et Remerciements

- Inputs

Remote processing:

Segmentation model: Prostate Multisequence Full text



Prostate - Multisequence

And the Input ADC volume msd-prostate-01-adc

Input T2 volume: msd-prostate-01-t2

Input ADC volume: msd-prostate-01-adc

- Outputs

Segmentation: Create new segmentation on Apply

Affichage 3D

Apply



Advanced

Local segmentation server

Sonde de données




Click on Create new
segmentation on
Apply

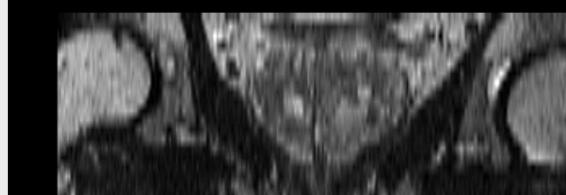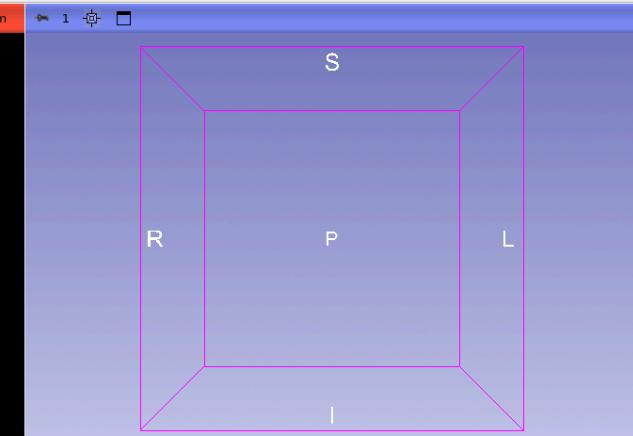

B: msd-prostate-01-t2

B: msd-prostate-01-t2



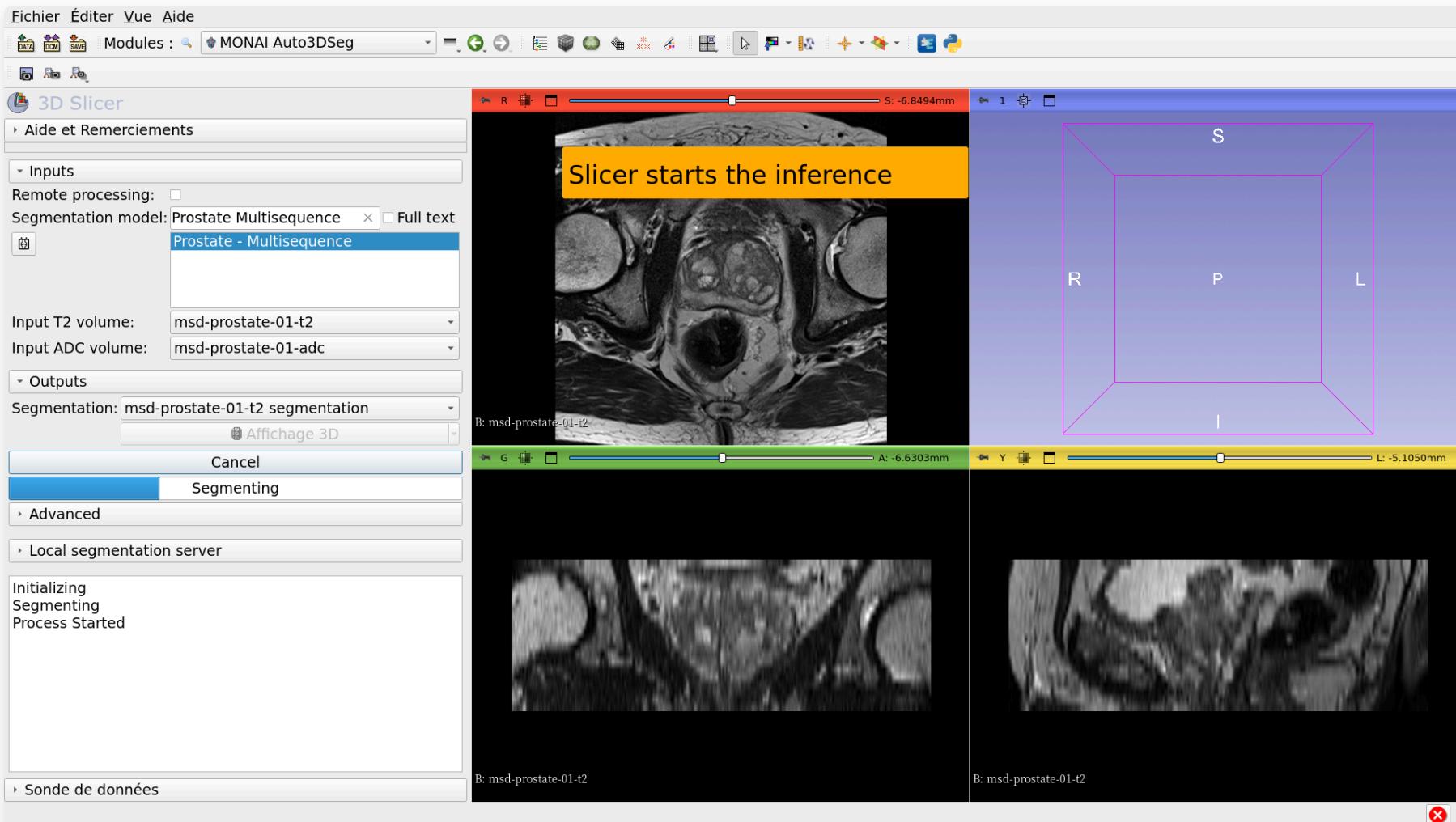

Fichier Éditer Vue Aide

DATA DICOM SAVE Modules : MONAI Auto3DSeg



3D Slicer

› Aide et Remerciements

Inputs

Remote processing:

Segmentation model: Prostate Multisequence Full text



Prostate - Multisequence

Input T2 volume:

msd-prostate-01-t2

Input ADC volume:

msd-prostate-01-adc

Outputs

Segmentation: msd-prostate-01-t2 segmentation

Affichage 3D

Apply

Advanced

Local segmentation server

Inference: 12.22 seconds

Logits: 0.26 seconds

Preds: 0.01 seconds

Convert to array: 0.00 seconds


Save: 0.01 seconds

ALL DONE, result saved in /tmp/Slicer/_SlicerTemp_2026-02-19_13+40+39.985/output-segmentation.nrrd

Importing Results



Processing finished.

Sonde de données

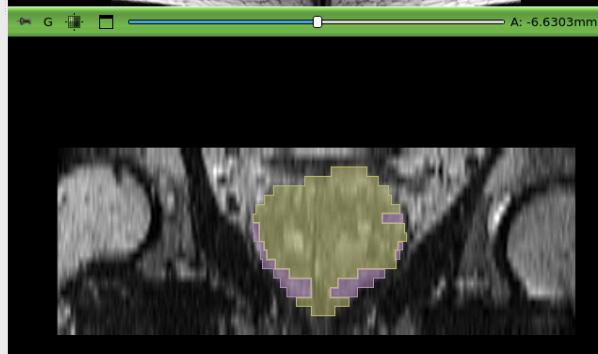


B: msd-prostate-01-t2


Slicer shows the result of the Albased prostate segmentation

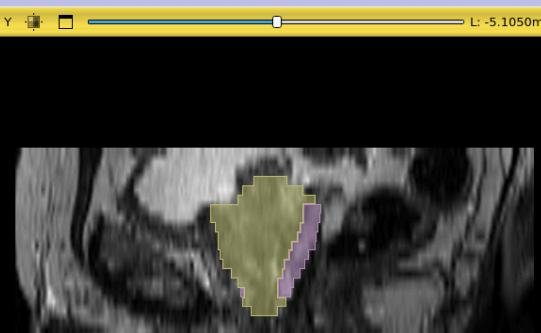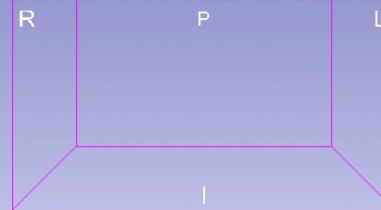

B: msd-prostate-01-t2



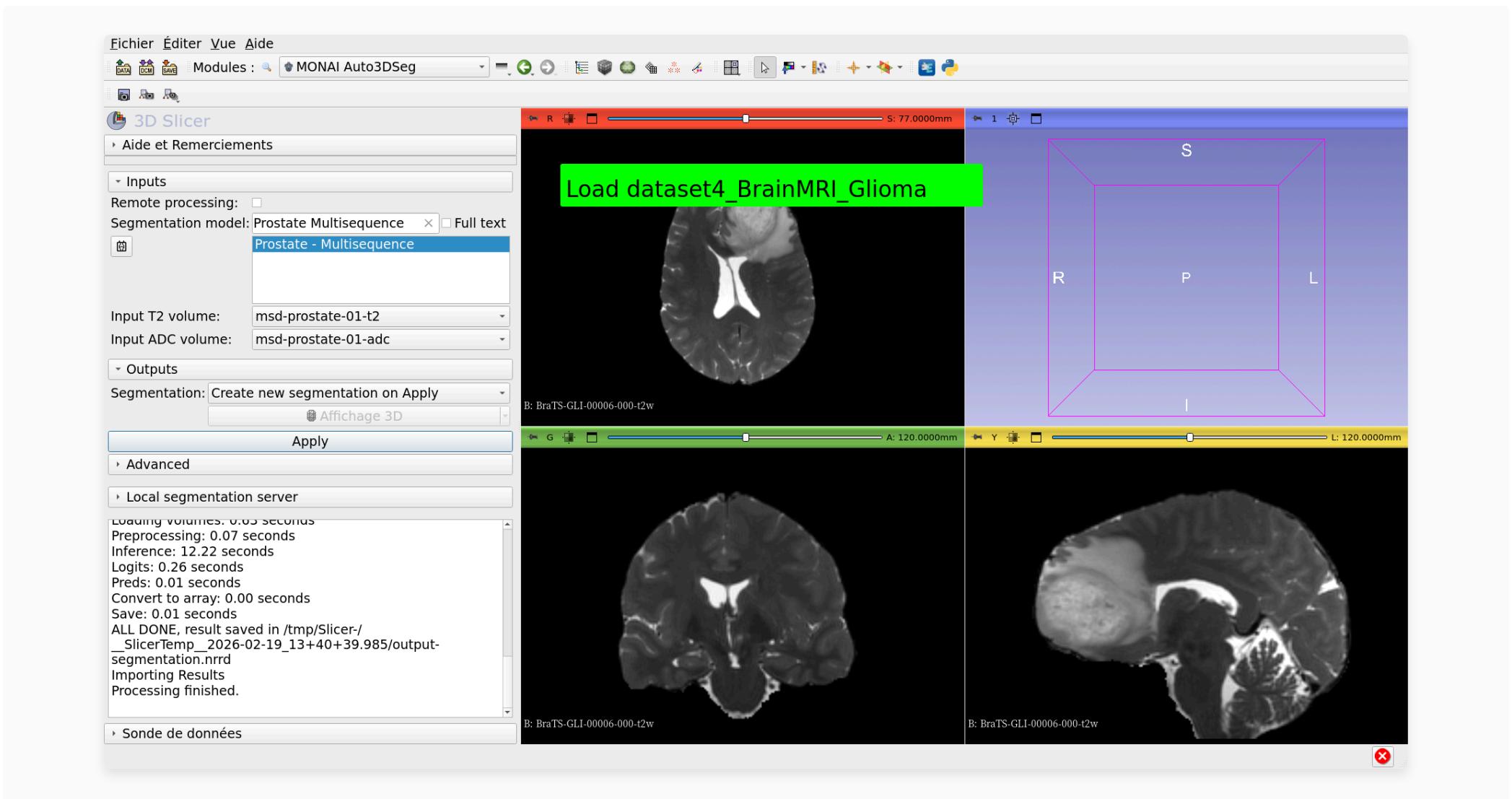

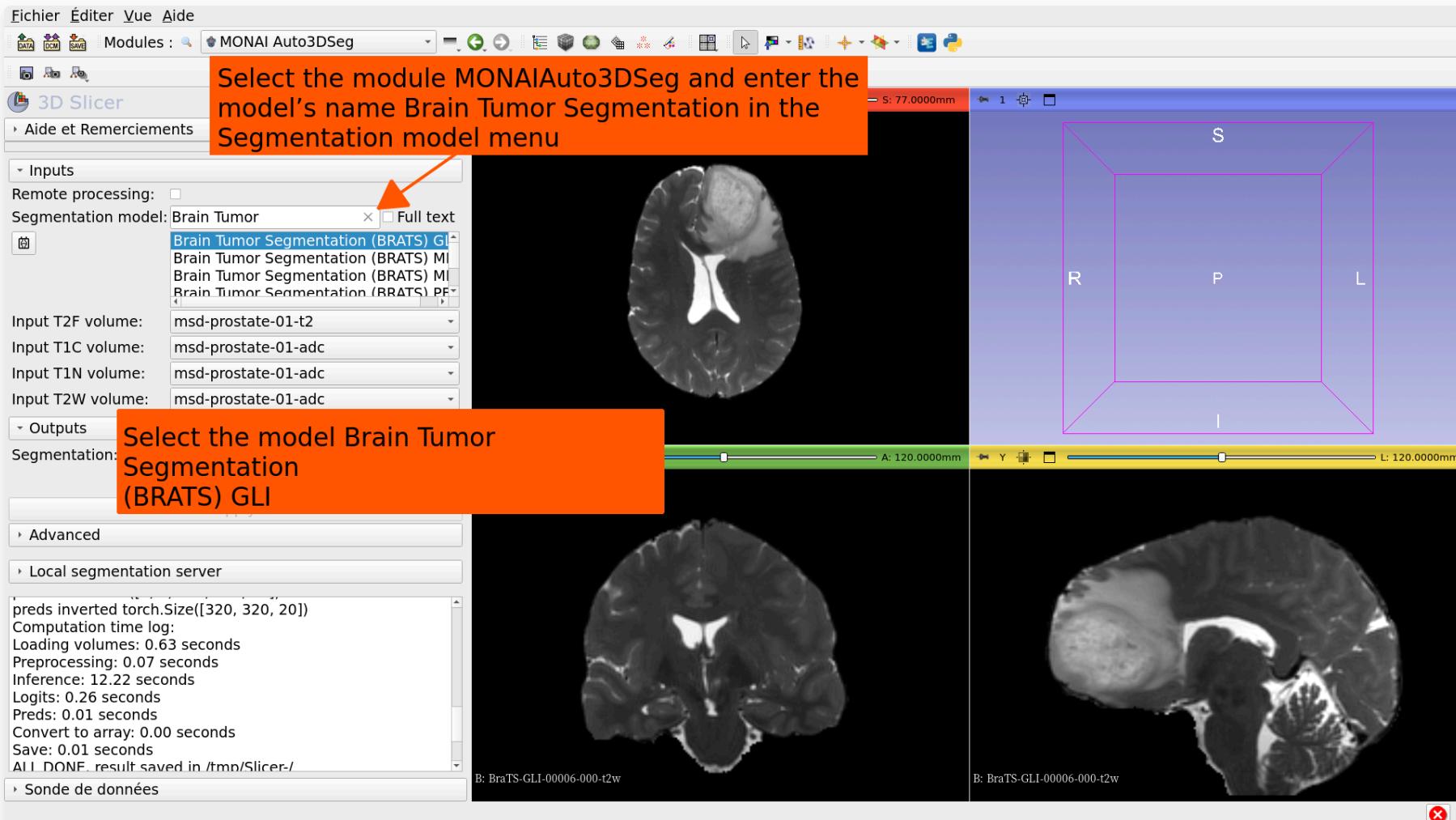

Fichier Éditer Vue Aide

DATA DICOM SAVE Modules : MONAI Auto3DSeg



3D Slicer

Aide et Remerciements

- Inputs

Remote processing:

Segmentation model: Brain Tumor Full text



Brain Tumor Segmentation (BRATS) GI

Brain Tumor Segmentation (BRATS) MI

Brain Tumor Segmentation (BRATS) MI

Brain Tumor Segmentation (BRATS) PF

Input T2F volume:

BraTS-GLI-00006-000-t2f

Input T1C volume:

BraTS-GLI-00006-000-t1c

Input T1N volume:

BraTS-GLI-00006-000-t1n

Input T2W volume:

BraTS-GLI-00006-000-t2w

- Outputs

Segmentation: Create new segmentation on Apply

Affichage 3D

Apply

Advanced

Local segmentation server

preds inverted torch.Size([320, 320, 20])

Computation time log:

Loading volumes: 0.63 seconds

Preprocessing: 0.07 seconds

Inference: 12.22 seconds

Logits: 0.26 seconds

Preds: 0.01 seconds

Convert to array: 0.00 seconds

Save: 0.01 seconds

All DONE! result saved in /tmp/Slicer/-

Sonde de données

Enter the input volumes as follows:

Input T2F volume:

BraTS-GLI_00005-000-t12f

Input T1C volume:

BraTS-GLI_00005-000-t1c

Input T1N volume:

BraTS-GLI_00005-000-t1n

Input T2W volume:



BraTS-GLI_00005-000-t2w

Click on Create new Segmentation on Apply

Click on Apply to start the segmentation

B: BraTS-GLI-00006-000-t2w

B: BraTS-GLI-00006-000-t2w

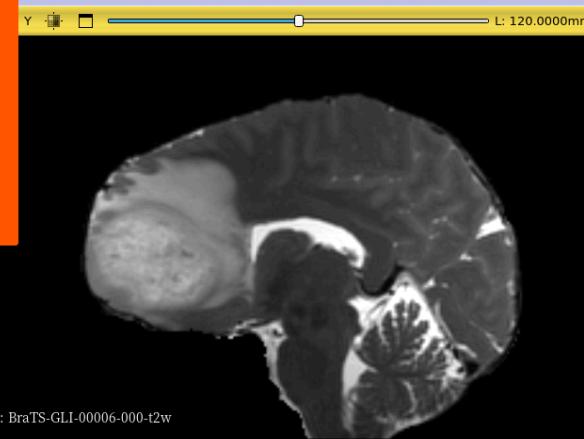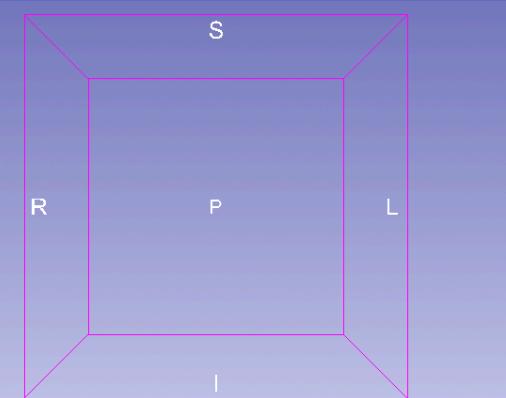

Fichier Éditer Vue Aide

DATA DICOM SAVE Modules : MONAI Auto3DSeg



3D Slicer

› Aide et Remerciements

‐ Inputs

Remote processing:

Segmentation model: Brain Tumor Full text



Brain Tumor Segmentation (BRATS) GI
Brain Tumor Segmentation (BRATS) MI
Brain Tumor Segmentation (BRATS) MI
Brain Tumor Segmentation (BRATS) PF

Input T2F volume: BraTS-GLI-00006-000-t2f

Input T1C volume: BraTS-GLI-00006-000-t1c

Input T1N volume: BraTS-GLI-00006-000-t1n

Input T2W volume: BraTS-GLI-00006-000-t2w

‐ Outputs

Segmentation: BraTS-GLI-00006-000-t2f segmentation

Affichage 3D

Cancel

Segmenting


› Advanced

› Local segmentation server



Initializing
Segmenting
Process Started

› Sonde de données


Slicer starts running the inference task

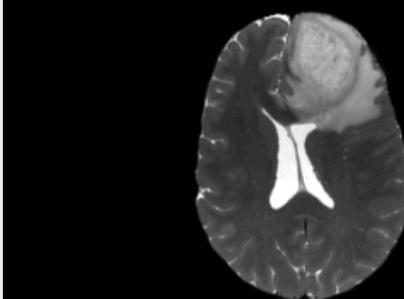

B: BraTS-GLI-00006-000-t2w

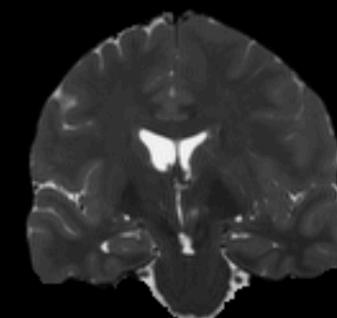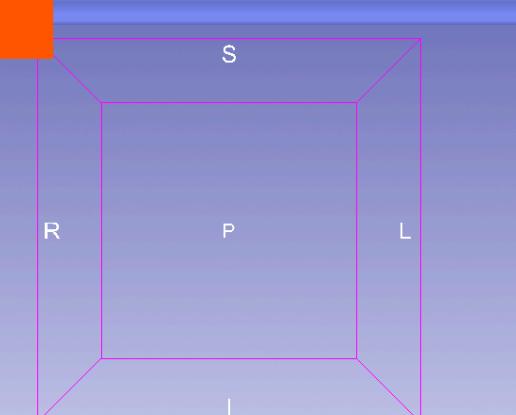



B: BraTS-GLI-00006-000-t2w

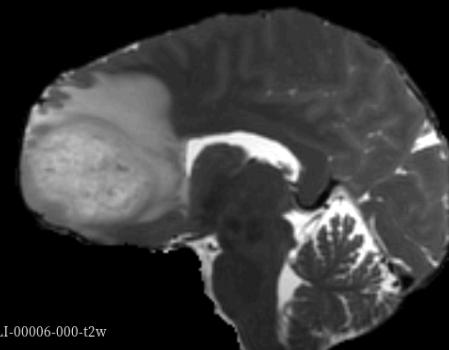



B: BraTS-GLI-00006-000-t2w




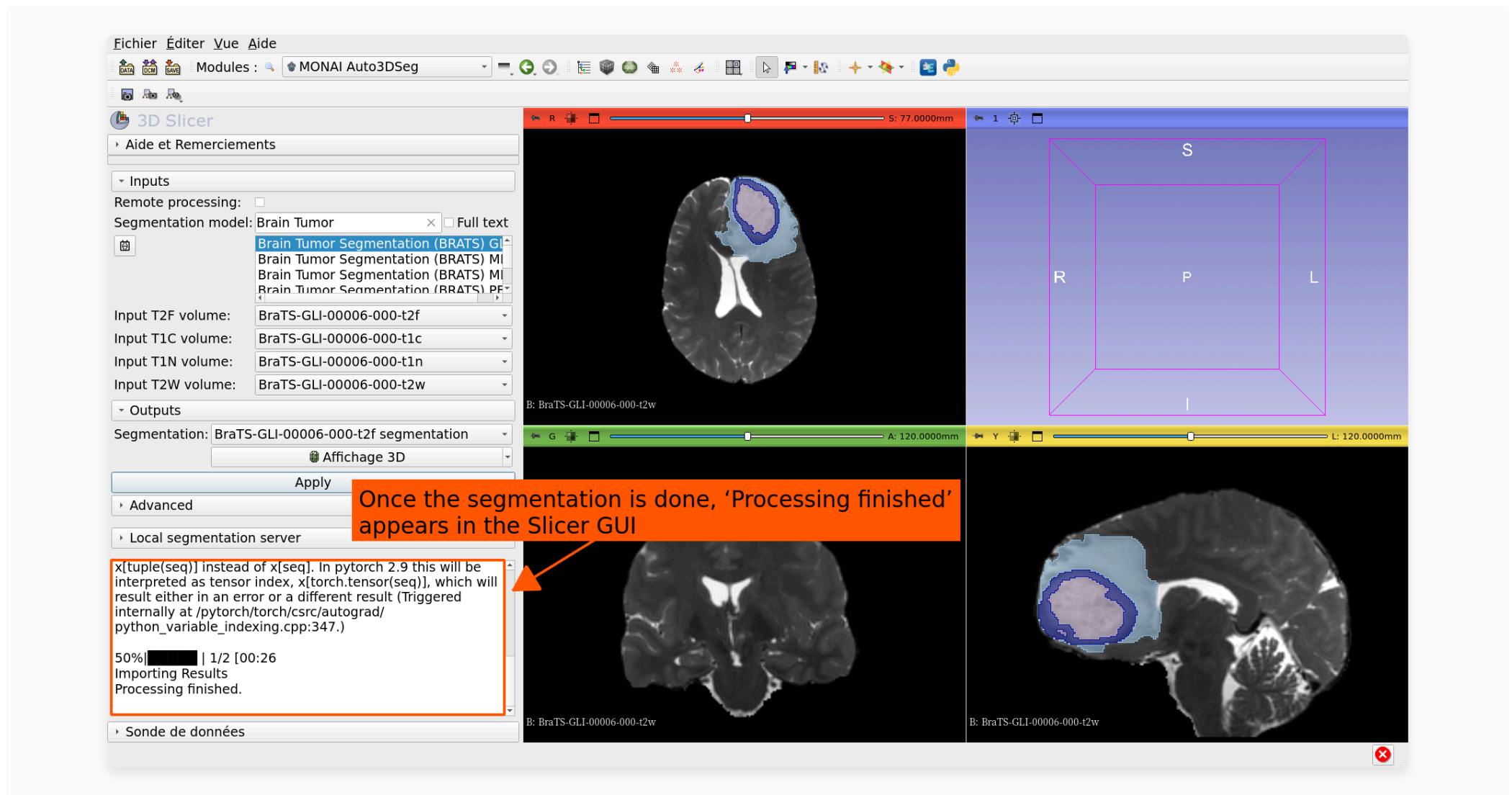

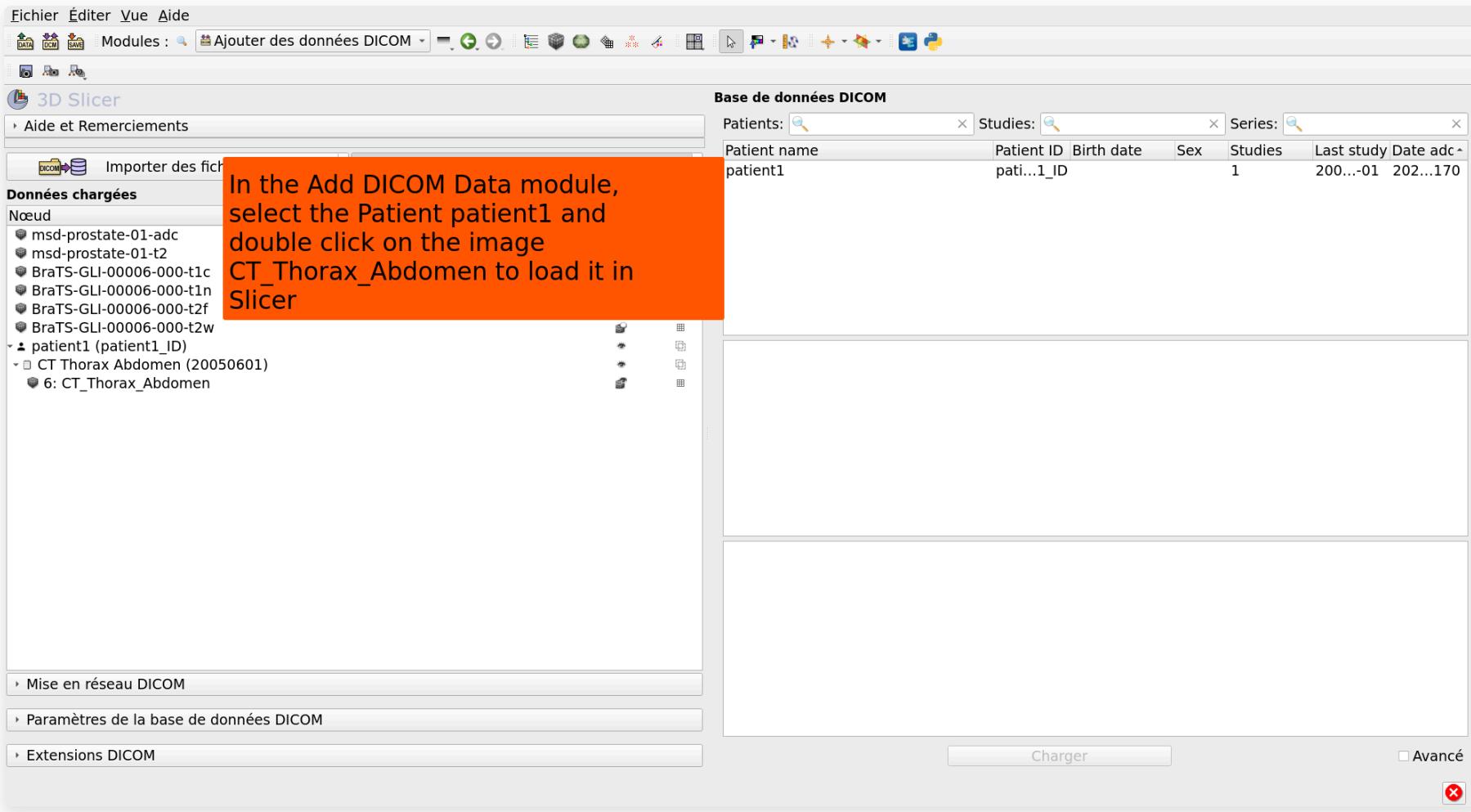

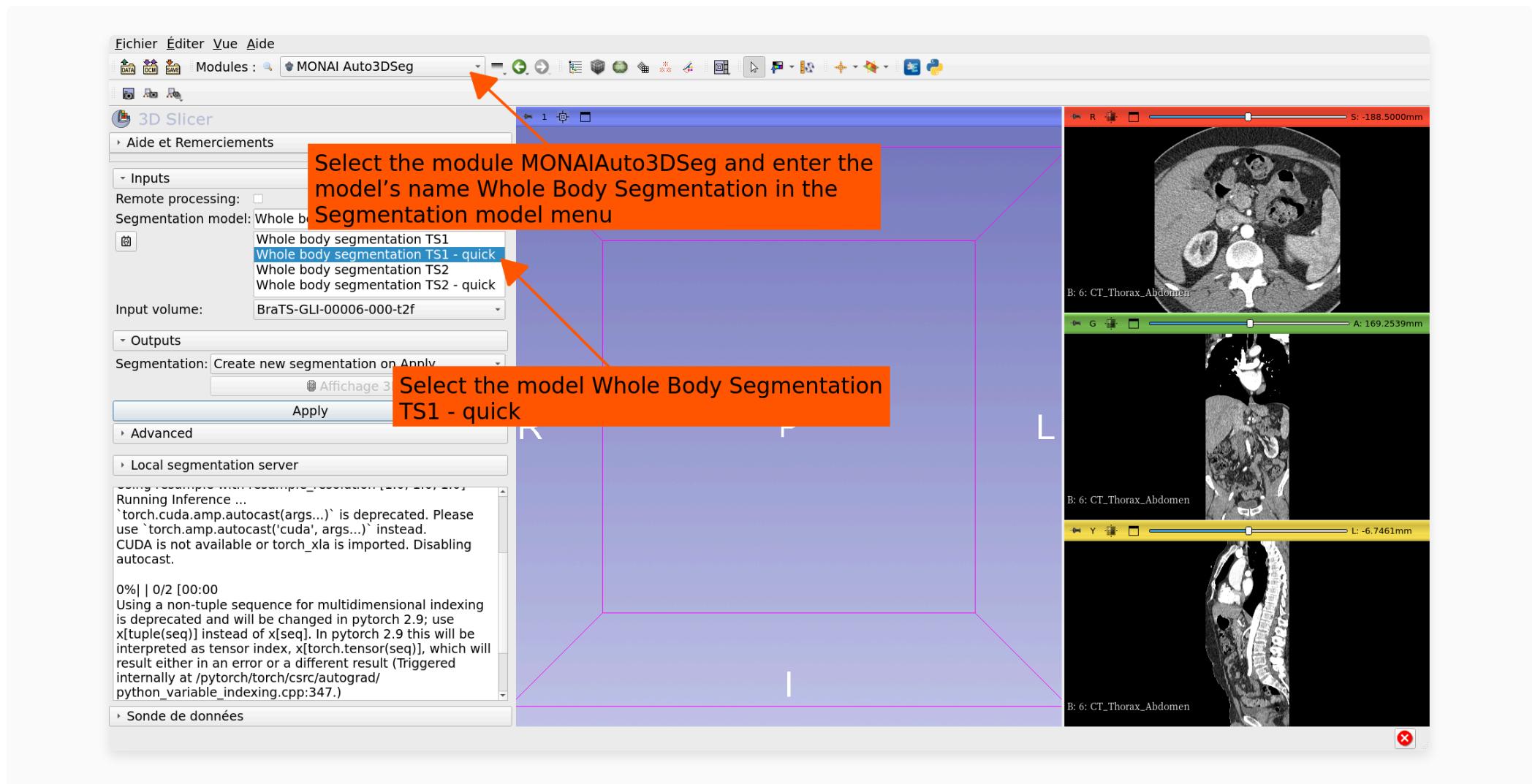

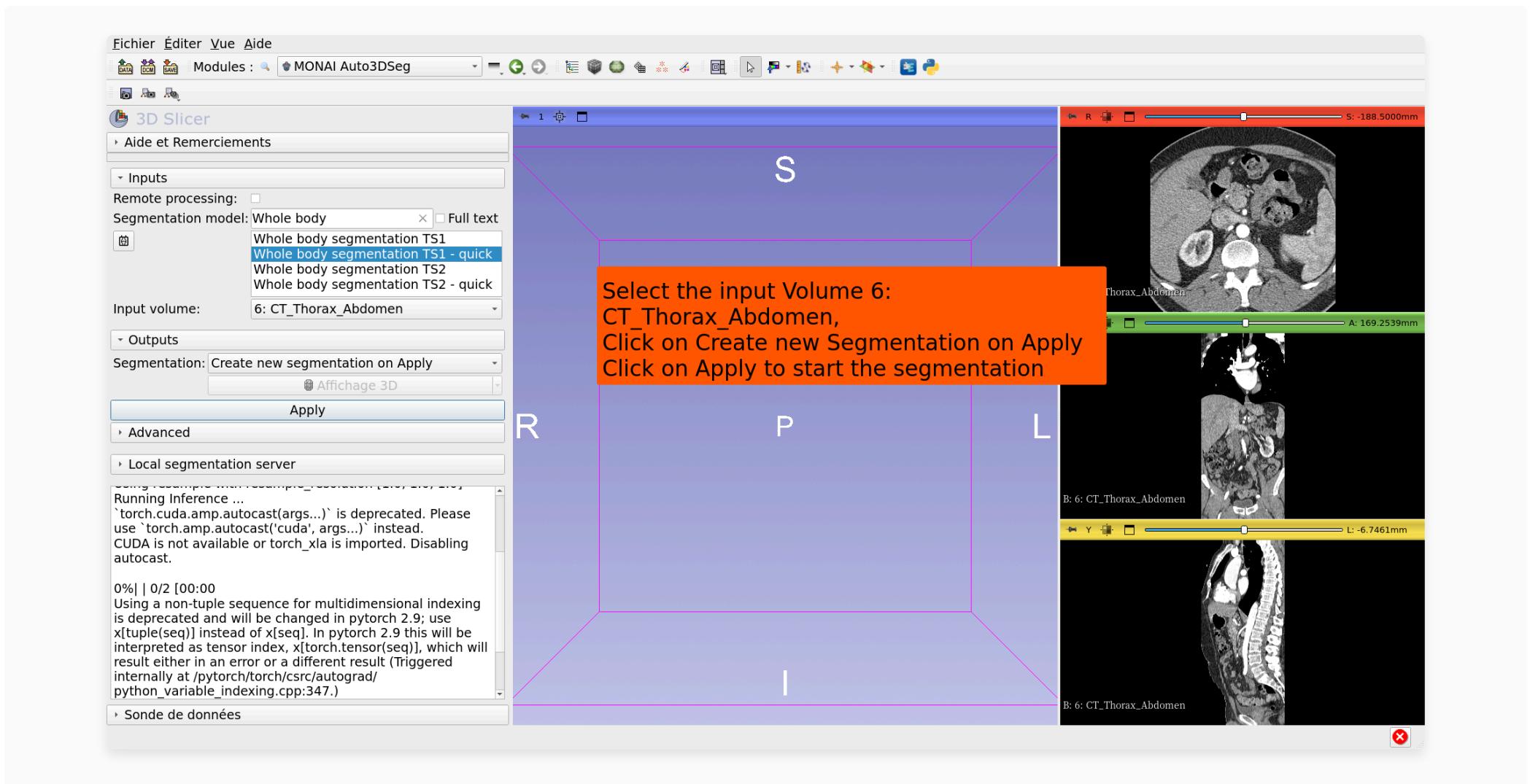

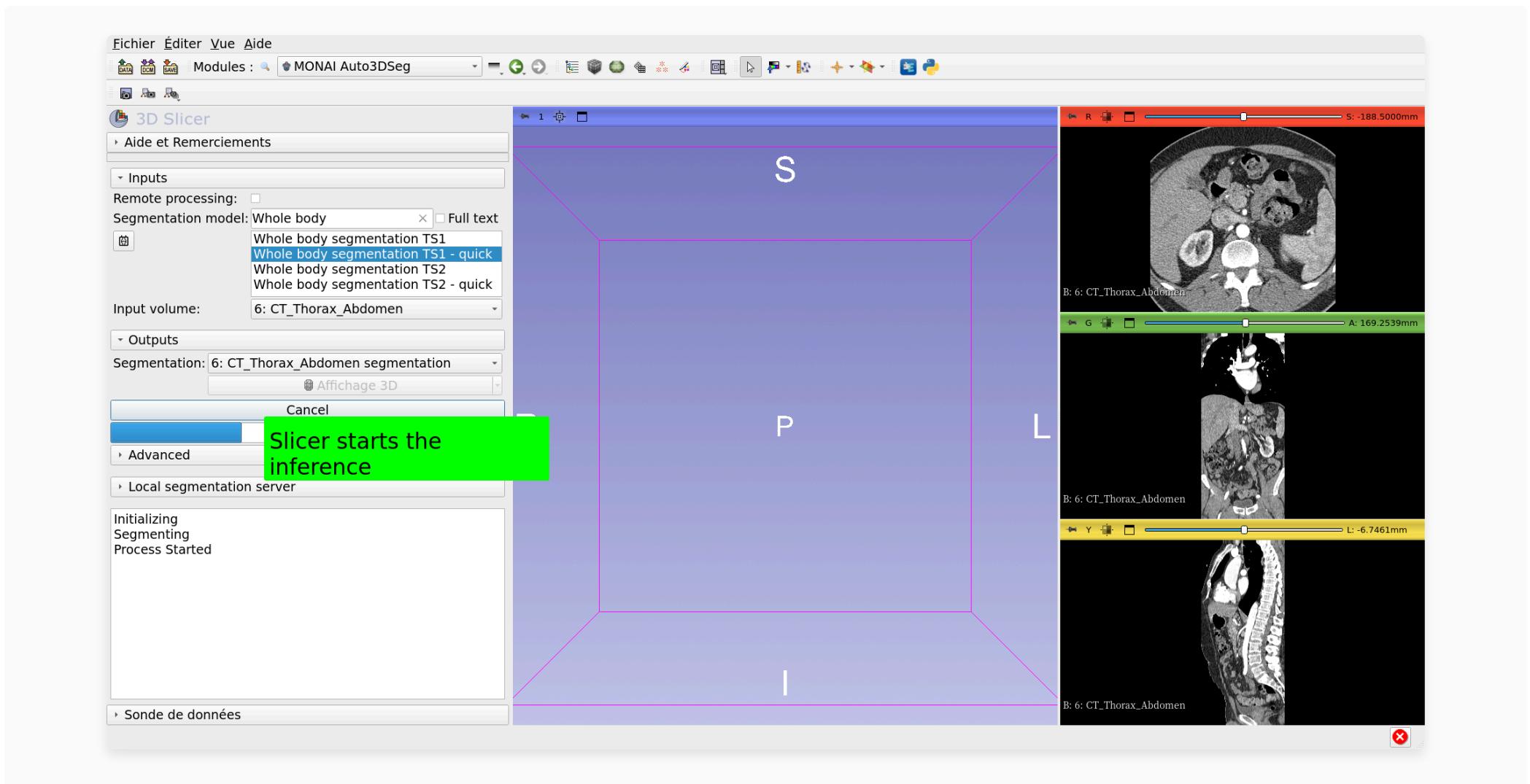

Fichier Éditer Vue Aide

Modules : MONAI Auto3DSeg



3D Slicer

› Aide et Remerciements

Remote processing:

Segmentation model: Whole body

Full text

Whole body segmentation TS1

Whole body segmentation TS1 - quick

Whole body segmentation TS2

Whole body segmentation TS2 - quick

Input volume: 6: CT_Thorax_Abdomen

› Outputs

Segmentation: 6: CT_Thorax_Abdomen segmentation

Affichage 3D

Apply

› Advanced

› Local segmentation server

Loading volumes: 1.55 seconds

Preprocessing: 0.52 seconds

Inference: 15.95 seconds

Logits: 0.83 seconds

Preds: 1.67 seconds

Convert to array: 0.04 seconds

Save: 0.72 seconds



ALL DONE, result saved in /tmp/Slicer/_SlicerTemp_2026-02-19_13+42+21.335/output-segmentation.nrrd

Importing Results

Processing finished.

› Sonde de données

Slicer displays the result of the AI-based segmentation using the Whole Body Segmentation TS1- quick

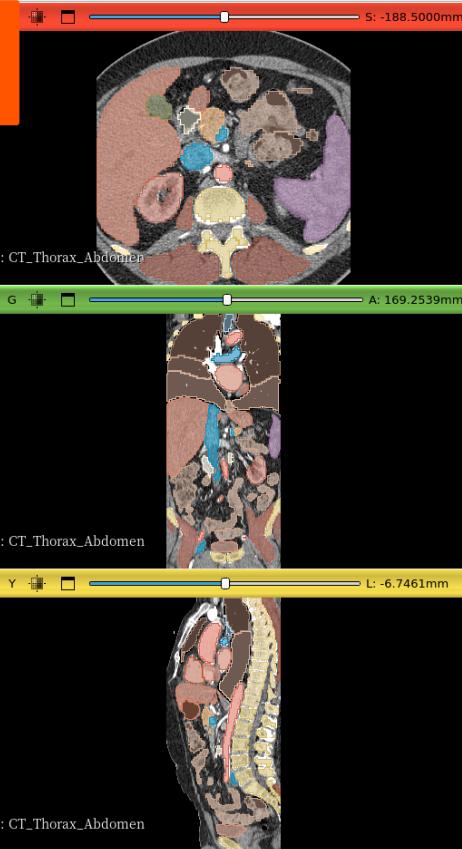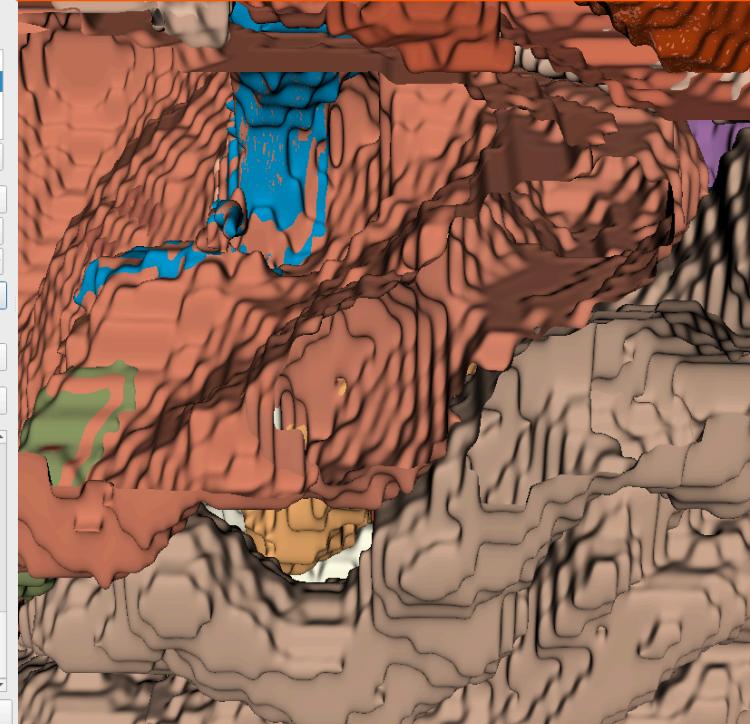

Acknowledgements

